



LE MASQ.

by **ceramIQ.**

RESPIRABILITÉ - PROTECTION - CONFORT - PERFORMANCE - ACTION

Professionnels ou sportifs, en contact avec le public, ce masque textile grand public **vous accompagnera et vous protégera** sur votre lieu de travail, lors de vos déplacements, lors de vos entraînements.

Doté d'une technologie **expérimentée** et **approuvée** par le sport de haut niveau, ce masque est conçu avec deux cordons élastiques passant derrière la tête et la nuque.

Il est confectionné avec un tissu microfibre à la fois très léger, très dense et stretch, imprimé **Gold-Reflect'line** : il procure au porteur une liberté de mouvement que seul notre technicité permet, et garantit **protection et bien-être** dans l'action.

COMMENT PORTER LE MASQUE ?



Avant de le mettre :

Avant de toucher le masque, lavez vos mains avec de l'eau et du savon ou une solution hydro-alcoolique.



Pour le mettre :


Passez l'élastique du bas autour de votre cou
Placez le masque au niveau de votre bouche.
Passez les lanières élastiques au-dessus des oreilles et derrière le crâne.

Ajustez le masque de façon à recouvrir le nez, la bouche et le menton.



Lorsque vous le portez :

Évitez de le toucher et de le déplacer.
Ne le mettez jamais en position d'attente sur le front ou sur le menton.

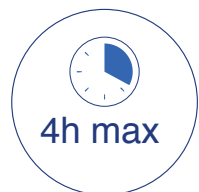

Il faut changer de masque :

Quand vous avez porté le masque 4h.
Quand vous souhaitez boire ou manger.
Quand il devient difficile de respirer.
Si le masque s'humidifie.
Si le masque est endommagé.
Si le masque est déformé et ne tient plus correctement contre votre visage.

AVANT OUVERTURE

Stockez le masque dans son emballage d'origine protecteur, dans **un endroit sec et à l'abri des rayons du soleil.**

Conservez-le dans une **humidité maximale de 75 %** et à une température comprise entre **-2°C et + 55°C** afin de préserver toutes ses caractéristiques.

POUR LE LAVAGE

Lavez le masque à la machine avec de la lessive. Choisissez un programme de lavage qui comprend au moins **30 min à 60°C minimum.**

Vous pouvez le mettre en machine avec votre linge.

Après avoir touché le masque, **lavez vos mains** avec **de l'eau et du savon** ou de la solution **hydroalcoolique.**



Ce masque a été testé pour **50 lavages**.
Après 50 lavages, la filtration du masque n'est plus garantie.

Si vous souhaitez le laver à 30 ou 40°, il vous faut pour cela le stériliser d'abord, vous pouvez faire bouillir de l'eau, déposer votre masque dans un récipient et verser l'eau bouillante sur celui-ci durant 1 à 2 minutes puis le laver en machine avec votre lessive habituelle.

SÉCURITÉ AVERTISSEMENT

- Ce masque a démontré une efficacité de **filtration supérieure à 90 %** pour des particules de 3 microns émises par la personne portant le masque. Le masque répond aux spécifications de la norme **AFNOR S76-001.**
- La **respirabilité** de ce **masque** a également été mesurée **>96l/m²/s** et permet aisément **son port pour une durée de 4 h.**
- Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ces masques, il appartient au seul utilisateur, et en aucun cas à son fabricant ou au fournisseur, de s'assurer de l'adéquation du masque avec les caractéristiques du milieu d'usage.
Il convient de suivre scrupuleusement les recommandations et modalités d'usage décrites ci-dessus.

RETROUVEZ NOUS SUR



facebook.com/Ceramiq

CERAMIQ-WEAR.COM

#amazingfeelings



@ceramiq_wear

AVEC LE PORT DU MASQUE, ON ADOPTE LES GESTES BARRIÈRES